



Instruções Para Liberar o Software da SDAMed no Firewall do Windows

1. Clique no ícone de busca na barra de navegação do Windows.

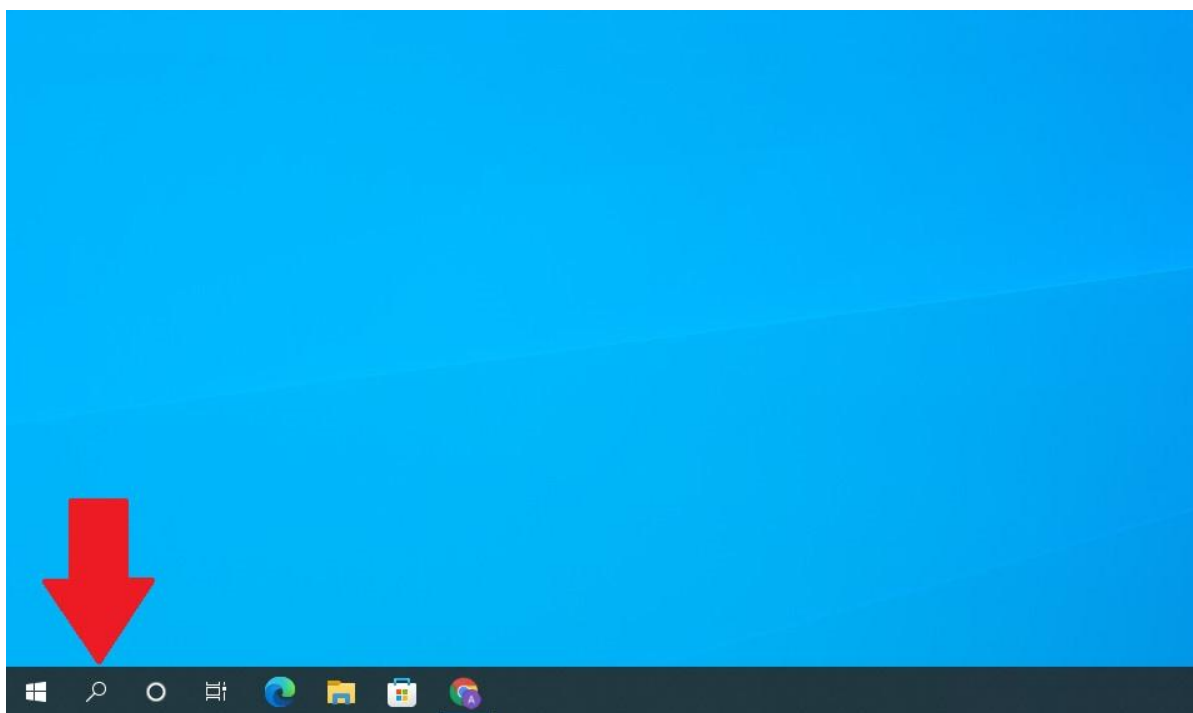


2. Busque por “permitir um aplicativo pelo firewall do windows” e abra o App encontrado no resultado.

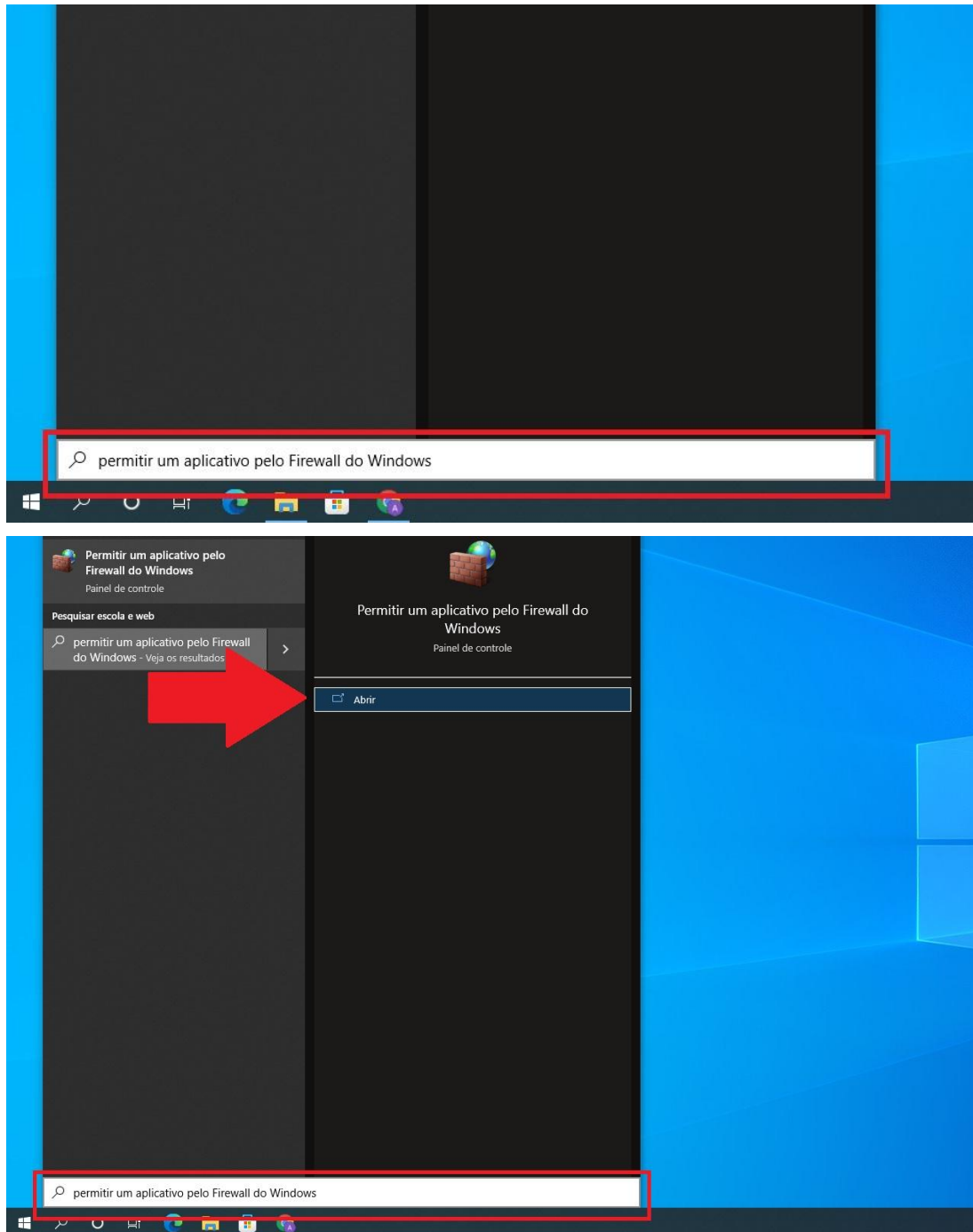


3. Clique em “Alterar configurações”.


Aplicativos permitidos

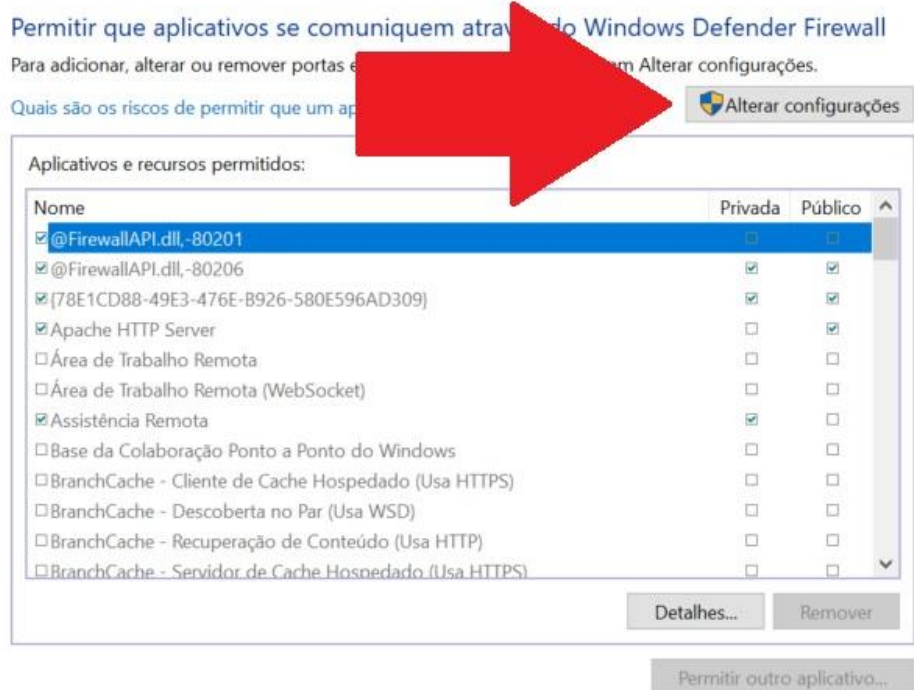



- Procure na lista de aplicativos o nome “Node.js: Server-side Javascript” (a lista é ordenada alfabeticamente).

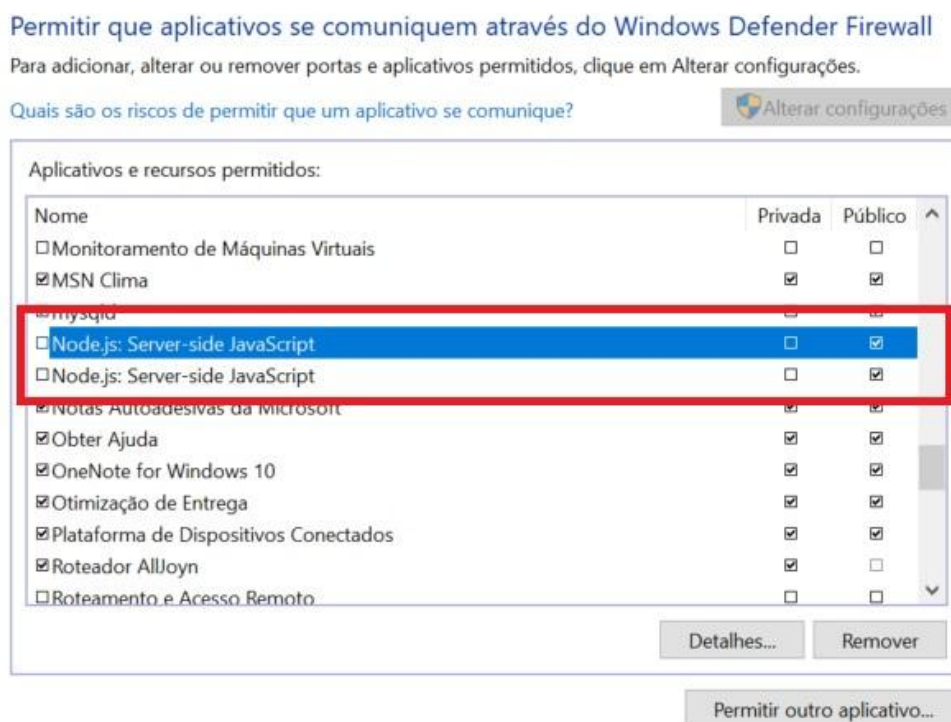


- Clique sobre o nome para selecionar a linha e então no botão “Detalhes...”.

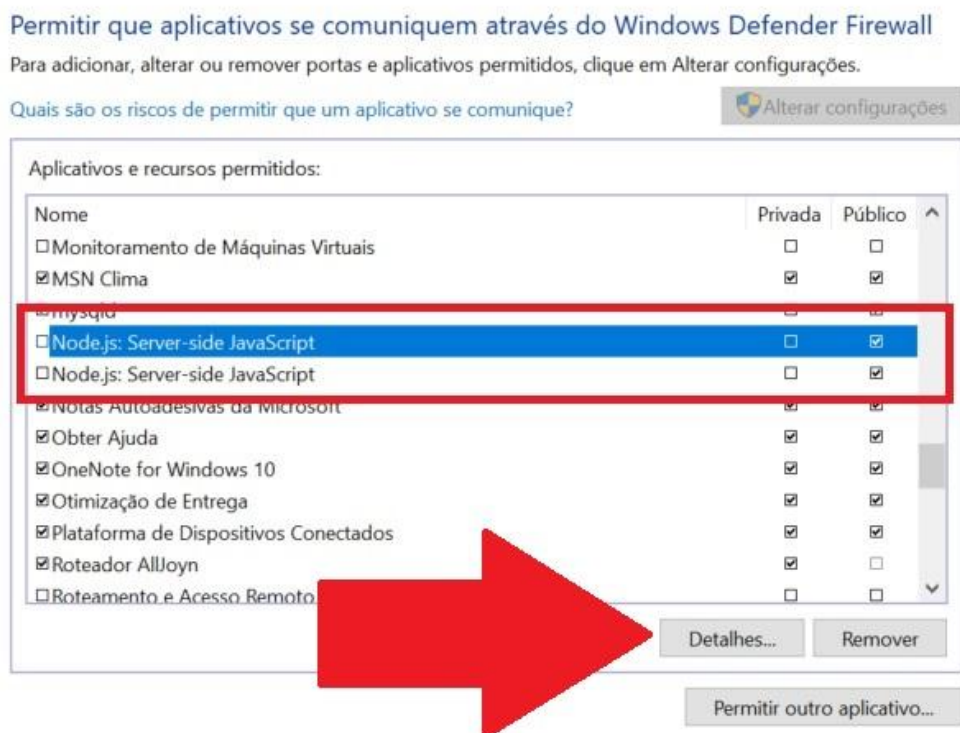

6. Confira se o campo “Caminho” na janela que foi aberta coincide com “C:\program files\sdamed\public\faye-server.exe” ou “C:\program files\sdamed\public\capture.exe” e então clique em “OK” para fechar a janela.

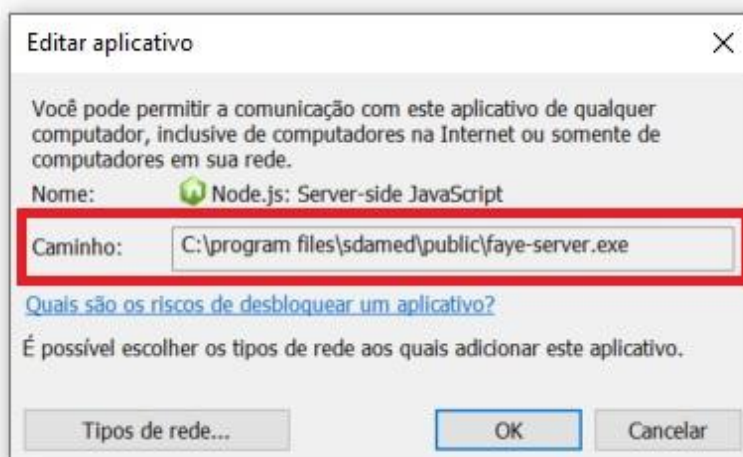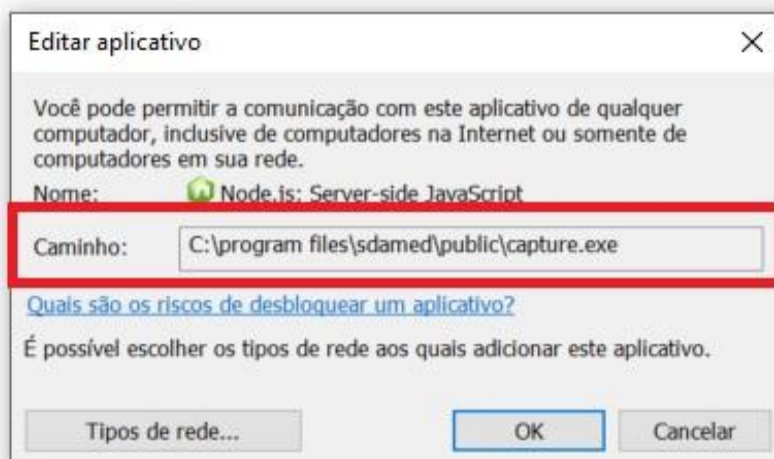

7. Caso o caminho coincida, garanta que todas as caixas de marcação da linha selecionada estejam marcadas, caso o caminho não coincida apenas siga para o próximo passo.

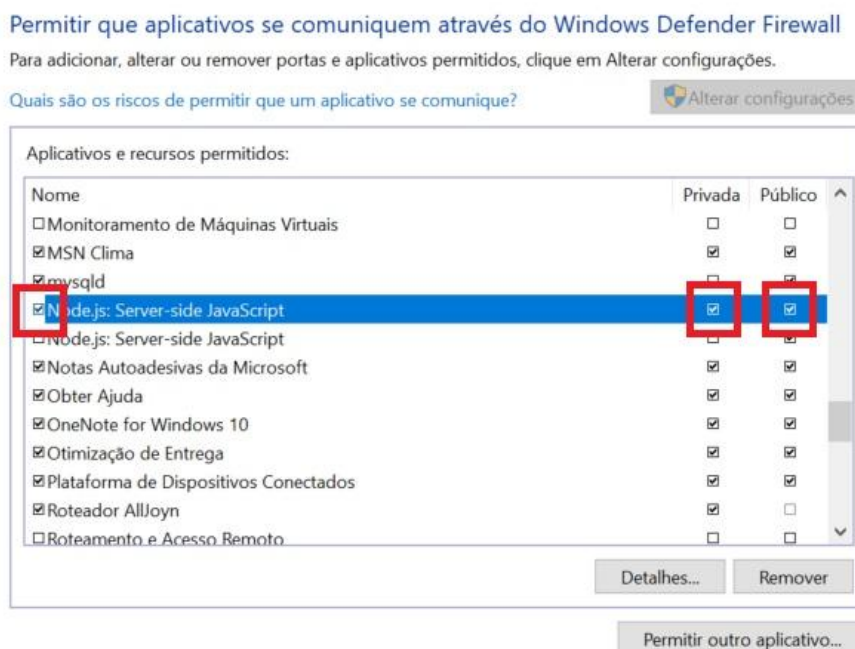

8. Repita esses passos (clicar sobre o nome, clicar em detalhes, verificar o caminho e marcar as caixa caso seja um App da SDAMed) para cada linha com nome “Node.js: Server-side Javascript” e então clique em “OK” para finalizar a configuração.

